


Thorax 910 (Damen)

Orpedo

Orthopedics Company KG
Lietzenburger Str. 75
D-10719 Berlin

Telefon: +49 (30) 88 71 202-00
Telefax: +49 (30) 88 71 202-11

Web: www.orpedo.com
Mail : info@orpedo.com

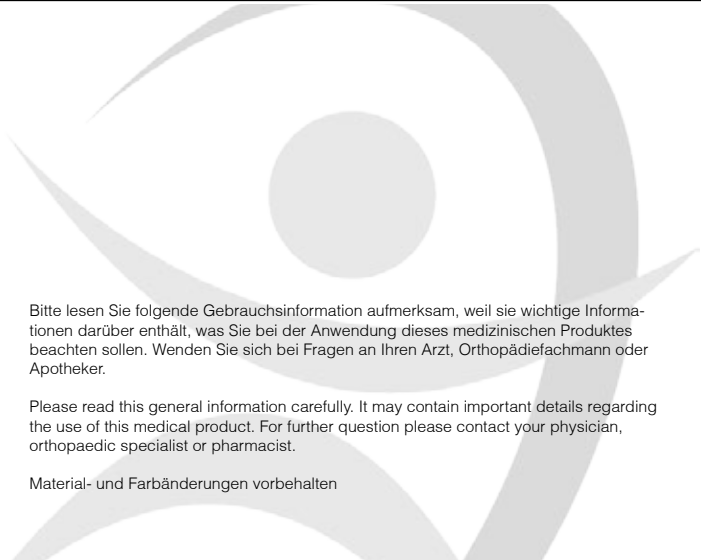

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses medizinischen Produktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker.

Please read this general information carefully. It may contain important details regarding the use of this medical product. For further question please contact your physician, orthopaedic specialist or pharmacist.

Material- und Farbänderungen vorbehalten

GEBRAUCHSINFORMATIONEN

Stand: 04/2015

Produktbeschreibung

Durch zirkuläre Kompression im Brustkorbbereich reduziert die Thorax 910 Rippenbandage die atmungsbedingten Brustkorbbewegungen. Der Heilungsprozess von Rippenbrüchen, Prellungen und anderen Traumata wird beschleunigt. Der Thoraxgurt ist leicht zu handhaben und hat einen angenehmen Tragekomfort.

Indikation

- Distorsionen der Brustwirbelsäule
- Rippenprellung
- Rippenbruch
- Entzündungen von Rippen und Wirbelsäule
- degenerative Veränderungen
- postoperativ

Kontraindikation / Anwendungsrisiken

Bisher nicht bekannt.

Gebrauchsanweisung

Die Bandage wird um die Rippen gelegt und vorne mit dem Klettverschluss geschlossen.

Das Produkt ist den Angaben und dem Zweck entsprechend anzuwenden.

Hinweis

Bei schweren Verletzungen, Wunden, Schwellungen, Allergien und anderen Erkrankungen bzw. Komplikationen ist unbedingt der Arzt oder Apotheker zu konsultieren. Um den korrekten Sitz der Thorax 910 (Damen) zu gewährleisten, sollte das erste Anlegen und Einstellen durch den Arzt, Orthopädiefachmann oder Apotheker erfolgen. Anwendung während des Schlafens nur nach Rücksprache mit dem Arzt, dem Orthopädiefachmann oder Apotheker. In Verbindung mit der Bandage bitte keine Salben anwenden!

Pflegeanleitung (30°)

Die Bandage vorsichtig mit der Hand bei 30° C in milder Seifenlauge reinigen. Erhitzen durch direkte Sonnenstrahlen, Heizkörper, Bügeleisen, o. ä. unbedingt vermeiden. Nicht bleichen, nicht chemisch reinigen.

Farbe

weiß

INSTRUCTION FOR USE

Status: 04/2015

Specification

The Thorax 910 (Woman) reduces the movement of breathing of the chest by circular compression in the area of the thoracic cage. The healing of contusion and other traumas is supported.

Indication

- distortion of thoracic vertebral column
- rib contusion
- rib fracture
- inflammation of ribs and spine
- degenerative deformans
- postoperative

Contraindication

Unknown.

Instructions

Place the support round the ribs and close in front with Velcros. For the application of this product you have to follow its description and intention.

Notice

Please contact your physician or pharmacist in any of the following cases: Severe injuries, open wounds, swellings, allergies and other diseases or complication. The first application and adjustment should be done by your physician, orthopaedic specialist or pharmacist to ensure the correct fitting of the Thorax 910 (Woman). Do not wear the support while sleeping. Do not use ointment or creams while wearing the support.

Washing instruction (30°)

The support may be washed in mild detergent at a temperature of 30° C (86° F). Avoid direct sunlight, heat of radiators, electric iron or the like. Do not bleach or dry clean.

Color

white